

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ НАШ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы с радостью ответим на любой вопрос или обработаем обратную связь по товару, ведь мы очень ценим наших клиентов.

Свяжись с нами в любом удобном мессенджере (Telegram, What'sApp, Viber) по номеру: **+7 (908) 736 60 73**



ЛАЗЕРНАЯ РАСЧЕСКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЛАЗЕРНАЯ
РАСЧЕСКА



ВВЕДЕНИЕ

Лазерная расческа HoneyCare предназначена для ухода за кожей головы, укрепления волос и стимуляции их роста.

Она сочетает в себе сразу три режима воздействия — светотерапию (красный свет), EMS-микротоки и вибрационный массаж. Такое сочетание позволяет мягко стимулировать волосяные фолликулы, улучшать микроциркуляцию и усиливать проникновение полезных компонентов уходовых средств.

Расческу можно использовать как дополнение к основному уходу, а также в качестве профилактики сезонного выпадения волос или их замедленного роста.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1** Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать провод, входящий в комплектацию.
- 2** Не подвергайте расческу воздействию высоких температур и избегайте попадания на нее прямых солнечных лучей.
- 3** Расческой запрещено пользоваться людям с имплантированными медицинскими устройствами (кардиостимуляторы и т.д.), а также тем, кто перенес операцию на сердце.
- 4** Перед первым использованием рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи для определения ее чувствительности.
- 5** Немедленно прекратите использование расчески, если чувствуете дискомфорт.
- 6** Избегайте использования расчески не по назначению, строго следуйте данной инструкции.
- 7** Пожалуйста, избегайте прямого взгляда на включенные световые элементы устройства.
- 8** Не используйте расческу в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, сауна, бассейн и т.д.) Следите, чтобы влага не попадала на корпус устройства и зарядную станцию.

❗ ВАЖНО


Проконсультируйтесь с врачом перед использованием расчески, если:

- вы недавно перенесли операцию на голове или косметическое лечение на этой зоне;
- вы испытываете дискомфорт при использовании или у вас есть кожный зуд.

ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ

Перед первым использованием обязательно проведите тест на небольшом участке кожи. Незначительное покраснение или легкое покалывание — допустимая реакция. Однако, если дискомфорт не проходит в течение нескольких часов, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом перед использованием.

ОБЩИЙ ВИД

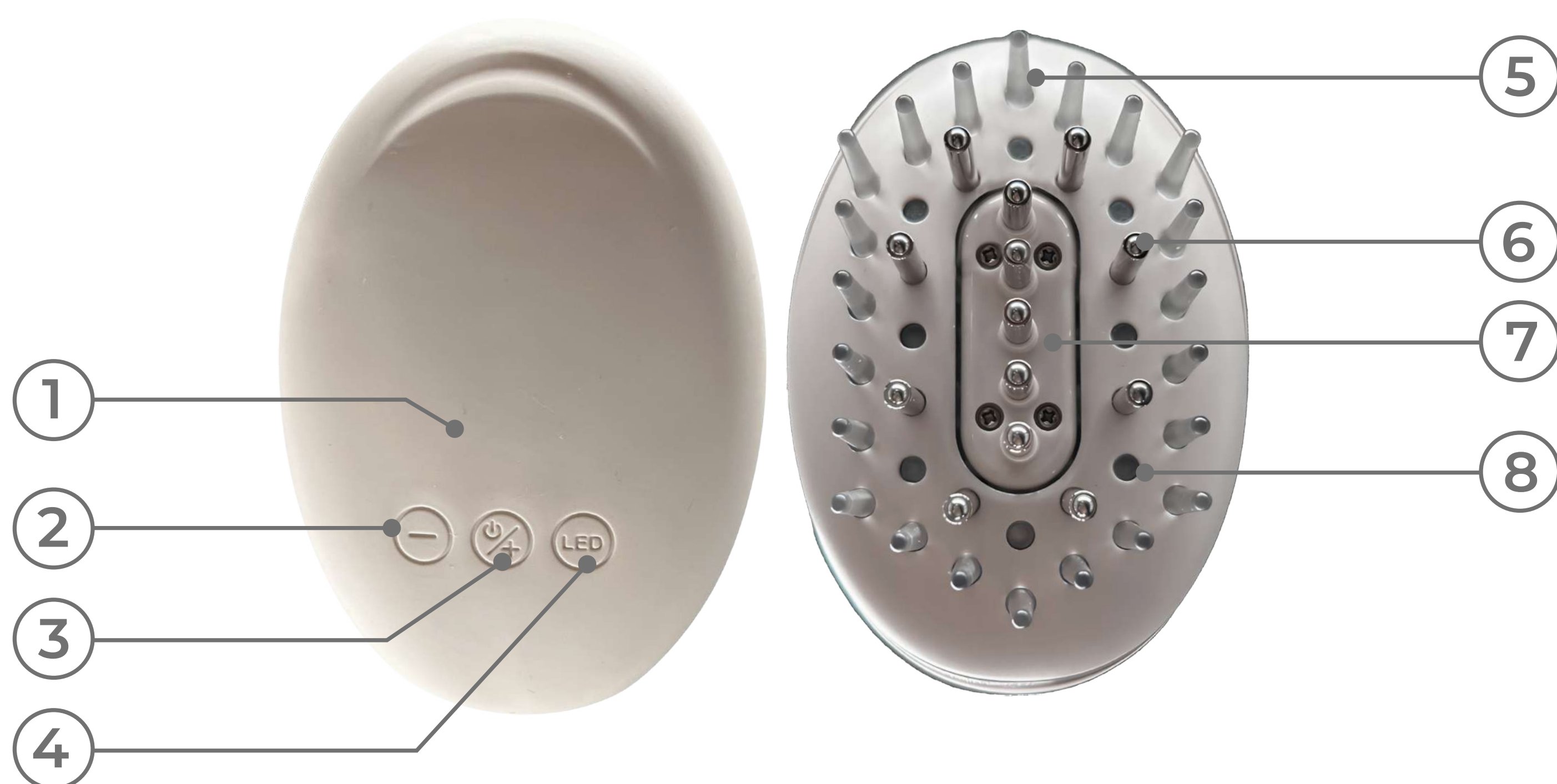

- ❶ Индикатор интенсивности ems-микротоков
- ❷ Снижение уровня воздействия ems-микротоков
- ❸ Включение / выключение устройства

Дополнительное касание увеличивает уровень воздействия микротоков.

- ❹ Светотерапия и вибромассаж

*Длительное нажатие: отключение / включение вибрации.
Короткое нажатие: включение / выключение режима светотерапии.*

- ❺ Зубчики со светодиодами (22 шт)
- ❻ Электродные зубчики Ems (13 шт)
- ❼ Съёмный резервуар для доп средств
- ❽ Светодиодные излучатели красного цвета (8 шт)

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор, выполнив следующие действия:

- Установите расческу горизонтально на подставку так, чтобы кнопки были обращены вниз.
- Во время заряда аккумулятора будет мигать красный индикатор.
- После полного заряда аккумулятора индикатор загорится зеленым светом.

Время заряда аккумулятора: 4 часа

Зарядное устройство: 5V, 1A

❗ ВАЖНО

Убедитесь, что характеристики блока питания составляют 5V-1A, чтобы избежать перегрева и выхода из строя расчески.

Девайс не поддерживает быстрые зарядки и не заряжается от них.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ

- 1 Очистите зубчики и кожу расчески, тщательно протерев их сухой тканью.
- 2 Вымойте и высушите волосы. Процедура должна проводиться на чистых сухих волосах и коже головы.
- 3 Залейте в резервуар доп средство согласно вашим целям (сыворотка, лосьон или флюид).

❗ ВАЖНО

Не используйте масла по время процедуры, они закупоривают поры, мешают воздействию светотерапии и микротоков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА

- 1 Осторожно потяните за центральные зубчики расчёски — под ними находится встроенный резервуар, достаньте его.
- 2 Отодвиньте силиконовую заглушку и с помощью пипетки аккуратно наполните резервуар сывороткой, флюидом или лосьоном. Затем убедитесь, что заглушка плотно закрывает отверстие.

Объем средства — не более 3 мл.
- ❗ Не пытайтесь снимать или отрывать силиконовую заглушку — это может нарушить герметичность резервуара и привести к утечке средства.
- 3 Вставьте резервуар обратно в корпус расчески.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите , чтобы включить расческу.

По умолчанию будут установлены: красный свет, вибрация и самая низкая интенсивность микротоковой терапии.


Рекомендуем постепенно увеличивать интенсивность, давая коже привыкнуть.

Ощущение легкого покалывания на коже — в рамках нормы! Но дискомфорта быть не должно. Высокая интенсивность не равна эффективности.


МИКРОТОКИ, КРАСНЫЙ СВЕТ, ВИБРОМАССАЖ.

Регулировка интенсивности микротоков.


Нажмите кнопки +/-, чтобы установить желаемую интенсивность.

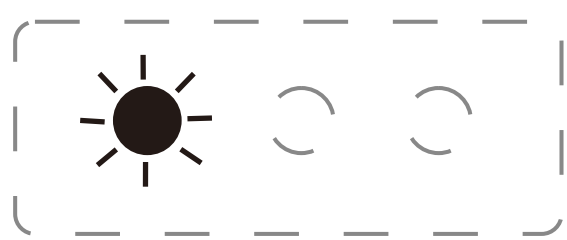

Низкая
интенсивность

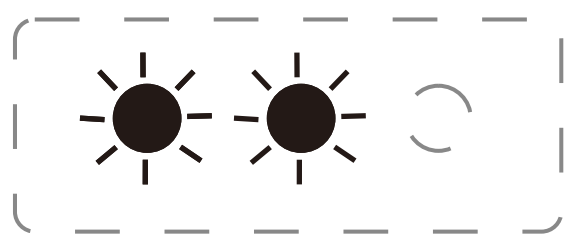

Средняя
интенсивность

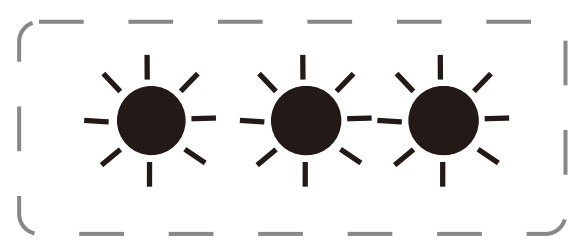

Высокая
интенсивность

- Управление интенсивностью микротоков: удерживайте кнопку .
- Управление красным светом: короткое нажатие на кнопку .
- Управление вибрацией: нажмите и длительно удерживайте кнопку , чтобы включить или выключить режим вибромассажа.

РЕЖИМЫ

СВЕТОТЕРАПИЯ (КРАСНЫЙ СВЕТ)

Красный свет глубоко проникает в кожу головы, улучшает кровообращение и стимулирует обменные процессы. Это помогает активизировать рост волос, укрепить корни и снизить выпадение. Также красный свет обладает легким противовоспалительным действием.

EMS-МИКРОТОКИ

Микротоковая стимуляция воздействует на волосяные фолликулы с помощью безопасных импульсов тока. Этот режим улучшает тонус кожи головы, усиливает питание корней волос и помогает активизировать спящие волосяные фолликулы. Особенно эффективен он в зонах истончения волос.

ВИБРОМАССАЖ

Мягкая вибрация улучшает микроциркуляцию, расслабляет кожу головы и усиливает действие остальных режимов. Она также помогает снять мышечное напряжение, делая процедуру особенно комфортной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ И ВМЕСТЕ

Можно чередовать или миксовать режимы в одной процедуре, чтобы добиться максимального эффекта.

МИКРОТОКИ + ВИБРАЦИЯ (ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ + МАССАЖ)

Этот тандем улучшает питание волосяных фолликулов, помогает активным компонентам доп средства проникать глубже в кожу и усиливает отток застойной жидкости.

Аккуратно проводите расческой по всей поверхности кожи головы, особенно в зонах с истончением волос. Уделяйте внимание затылочной и височной зонам.

МИКРОТОКИ + СВЕТОТЕРАПИЯ (АНТИСТРЕСС + РЕГЕНЕРАЦИЯ)

Это сочетание работает на клеточном уровне — красный свет и микротоки дают мощный омолаживающий и восстанавливающий эффект.

СВЕТ + ВИБРАЦИЯ + МИКРОТОКИ (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)

Максимальное стимулирующее воздействие: улучшение кровообращения, активация клеток, питание волосяных луковиц и мягкий массаж.

Механика процедуры для двух последних режимов:

Распределите волосы на проборы, начиная с центрального: отделяйте пряди тонкой расческой или пальцами (по 1-2 см).

Медленно проводите расческой по каждой пряди в направлениях: ото лба к затылку или от макушки к вискам. Не торопитесь, можно прочесывать каждую прядь по 1-2 минуте.

❗ ВАЖНО


Если кожа головы чувствительная, лучше чередовать режимы по дням или делать паузу между включениями.

Главное — наблюдайте за ощущениями.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Расположите расческу так, чтобы зубчики плотно прилегали к коже головы.

Начните выполнять массажные движения с линии роста волос и перемещайте расческу в направлении их роста.

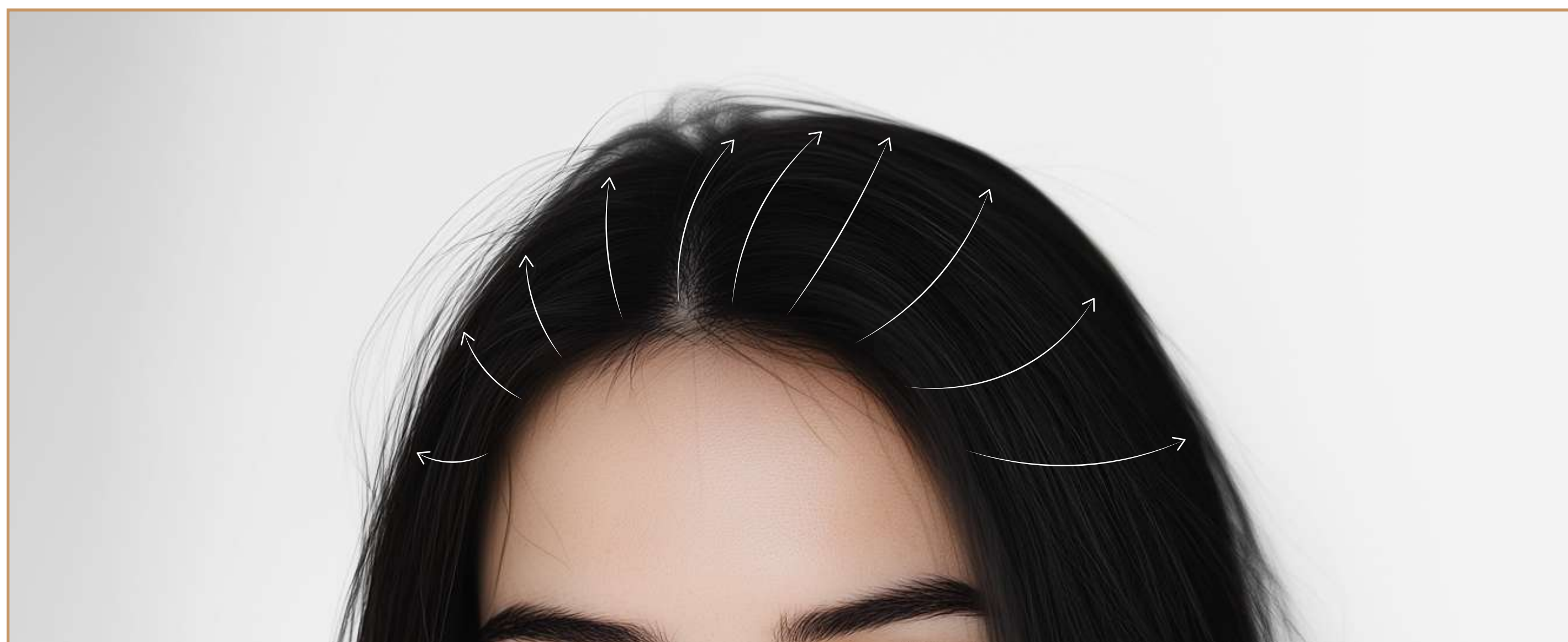

Во время процедуры придерживайте волосы, чтобы уменьшить нагрузку на кожу головы.

Продолжительность одного сеанса: 10 минут.

Расческа имеет функцию автоматического отключения спустя этот временной интервал.

КУРС ПРОЦЕДУР

Средняя продолжительность курса — 1.5- 2 месяца.

Рекомендуется 2–3 полных курса в год.

Один курс — 6–8 недель, затем перерыв минимум 4 недели, чтобы кожа головы отдохнула, а эффект закрепился. Такой график поддерживает здоровье кожи и волос без перегрузки.

Частота: 3–4 раза в неделю.

Оптимально использовать с интервалом в 1–2 дня — это позволяет стимулировать кожу головы регулярно, не вызывая раздражения. Если кожа чувствительная или появляется дискомфорт, лучше выбрать интервал: через два дня.

❗ При необходимости выполняются поддерживающие процедуры между курсами.

ПОДБОР УХОДОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ

Заполняйте резервуар только лёгкими, жидкими средствами — сыворотками или лосьонами на водной или гелевой основе.

Объём — до 3 мл.

Перед началом процедуры можно слегка нажать на зубчики, чтобы убедиться, что средство поступает.

Оно распределяется по коже головы прямо во время процедуры, а активные компоненты усиливаются благодаря действию микротоков, вибрации или светотерапии.

Подходящие формулы:

Легкие тоники и сыворотки: против выпадения волос, для стимуляции роста, для увлажнения кожи головы.

Активные компоненты, которые отлично сочетаются с режимами расчески: пептиды, кофеин, растительные экстракты (розмарин, арника, центелла), витамины группы В, ниацинамид.

Избегайте: масел и жирных текстур, сывороток с силиконами, продуктов с плотной кремовой основой.

❗ ВАЖНО

Результаты от использования устройства во многом зависят от того, по какой причине начали выпадать волосы и в каком состоянии находится кожа головы.

Если вы замечаете, что волос стало заметно меньше, они редеют, становится менее густыми или выпадают больше обычного, лучше проконсультироваться с врачом — трихологом или дерматологом. Специалист поможет выяснить причину и подобрать правильный уход.

Лазерная расческа помогает усилить эффект от подходящих средств и процедур, но не заменяет лечение, если проблема серьёзная. Лучше всего работает комплексный подход — с поддержкой специалиста и правильным уходом.

УХОД ЗА РАСЧЕСКОЙ

- Перед очисткой убедитесь в том, что расческа выключена.
- Избегайте использования абразивных чистящих средств или любых активных компонентов, которые могут деформировать прибор.
- После каждого использования протирайте корпус устройства мягкой и влажной тканью.
- Для очистки зубчиков используйте ватный диск, смоченный в хлоргексидине. Пройдитесь им не только по поверхности, но и в труднодоступных местах между зубчиками.
- После очистки насухо протрите корпус и электроды мягкой сухой салфеткой.
- Резервуар можно промывать чистой водой, но не забывайте избегать попадания влаги на саму расческу.
- После очистки дайте резервуару высохнуть естественным путем или протрите его сухой тканью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- Храните расческу в сухом прохладном месте, вдали от горячей или влажной среды и прямых солнечных лучей.
- Храните девайс в недоступном для детей месте.
- Если вы не используете расческу в течение продолжительного времени, то рекомендуется периодически включать ее и заряжать аккумулятор.
- Всегда очищайте расческу перед тем, как убрать ее на хранение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 3,7 В


Номинальная мощность: 5 Вт

Входные параметры адаптера: 5V-1A

Емкость аккумулятора: 320 мАч


Размер: ~ 10x7x5 см

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ

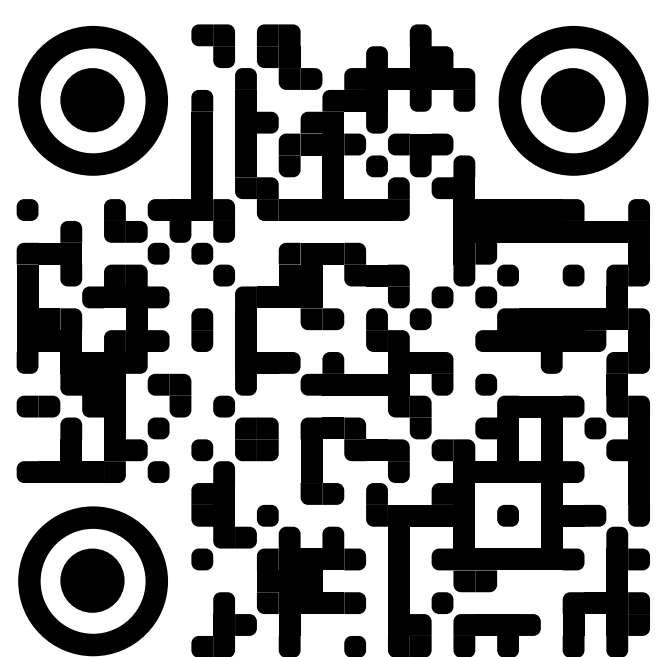

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Зарегистрируйте товар на сайте и получите расширенную гарантию.

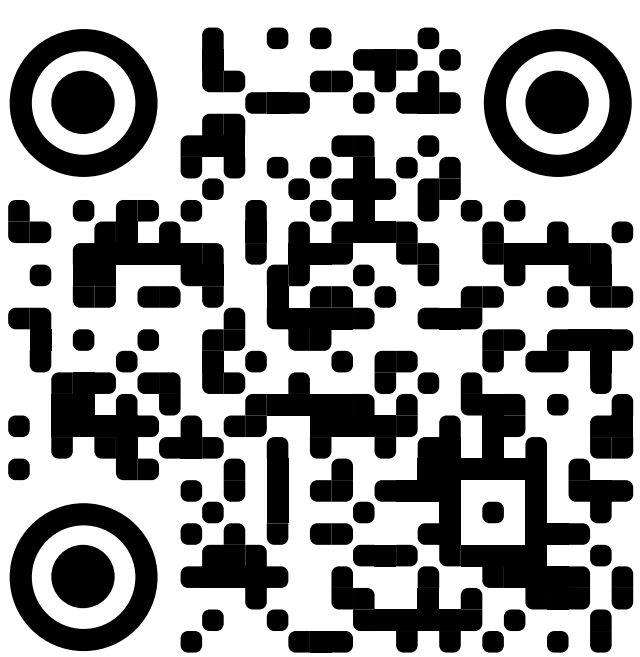

ТЕХПОДДЕРЖКА

Напишите нам в любом удобном мессенджере.