

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ НАШ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы с радостью ответим на любой вопрос или обработаем обратную связь по товару, ведь мы очень ценим наших клиентов.

Свяжись с нами в любом удобном мессенджере (Telegram, What'sApp, Viber) по номеру: **+7 (952) 775 74 99**




МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Пожалуйста, перед использованием массажера
внимательно прочитайте данную инструкцию.*

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

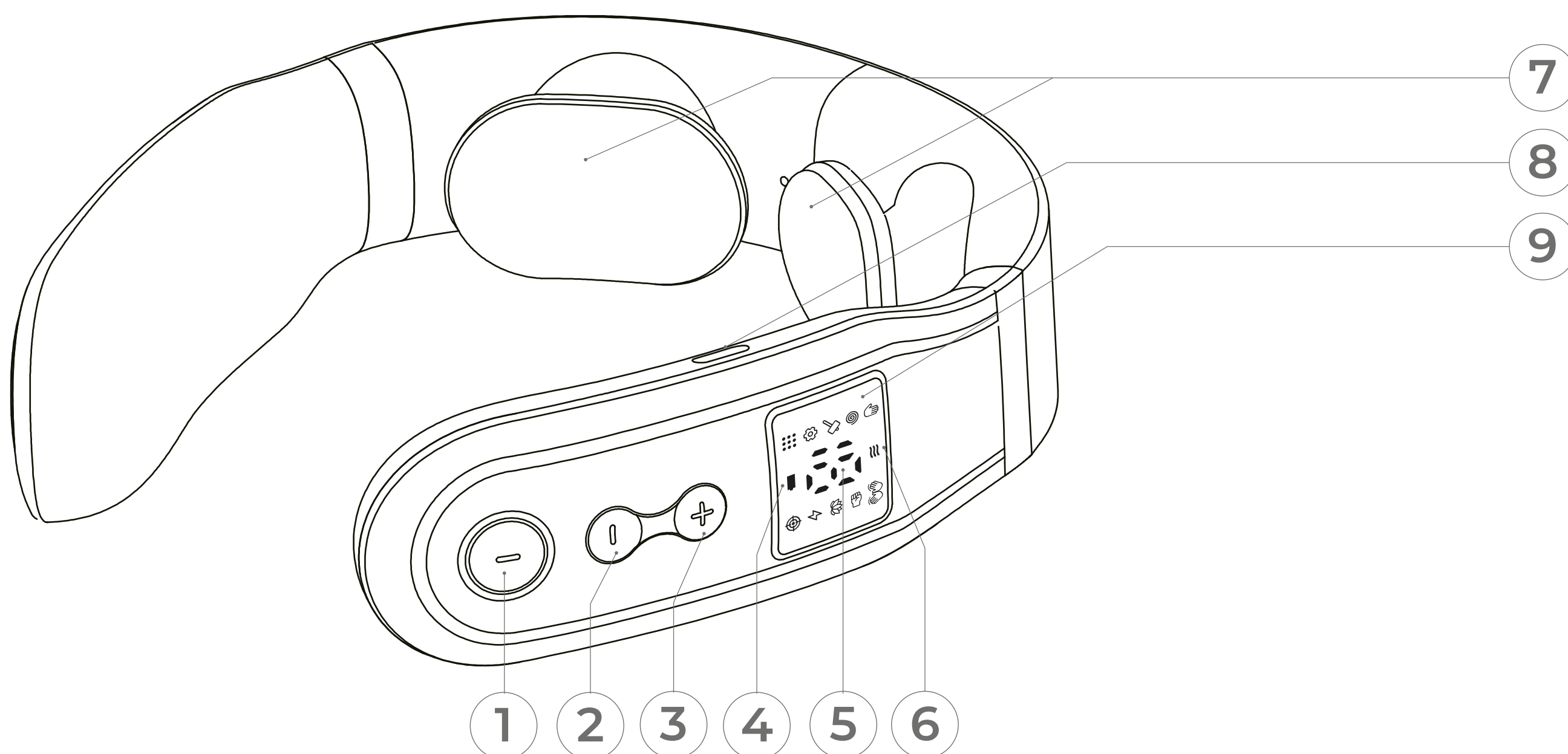

- ❶ Кнопка включения / выключения / смена режимов
- ❷ Кнопка уменьшения интенсивности
- ❸ Кнопка увеличения интенсивности
- ❹ Индикатор заряда аккумулятора
- ❺ Индикатор интенсивности массажа
- ❻ Индикатор режима нагрева
- ❼ Массажные электроды
- ❽ Разъем для заряда type-c
- ❾ Индикатор текущего режима

УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖЕРОМ

- 1 Включите прибор коротким нажатием на кнопку питания. По умолчанию будет выбран первый режим и включен подогрев.

- 2 Выберите необходимый режим, нажав на кнопку включения повторно, при каждом следующем нажатии будет включаться новый режим.
- 3 Длительное нажатие кнопки увеличения интенсивности выключает режим подогрева.
- 4 Выберите интенсивность массажа, с помощью кнопок «+» и «-», всего у массажера 16 уровней, рекомендуется начинать с 1-2 уровня.

❗ Начните с самого низкого уровня интенсивности, внимательно наблюдая за своими ощущениями. Нормальным считается умеренный уровень воздействия, при котором вы ясно осознаете воздействие еms, а процедура остается комфортной и приятной.


- 4 Рекомендуемое время сеанса: 15 минут.
- 5 По завершению сеанса массажа задержите кнопку включения / выключения, чтобы выключить прибор.

❗ Если процедура длилась 15 минут, по умолчанию массажер выключится через это время.

❗ ВНИМАНИЕ!

При каждом переключении вида массажа интенсивность возвращается к первому уровню.

ИНТЕРФЕЙС ПУЛЬТА

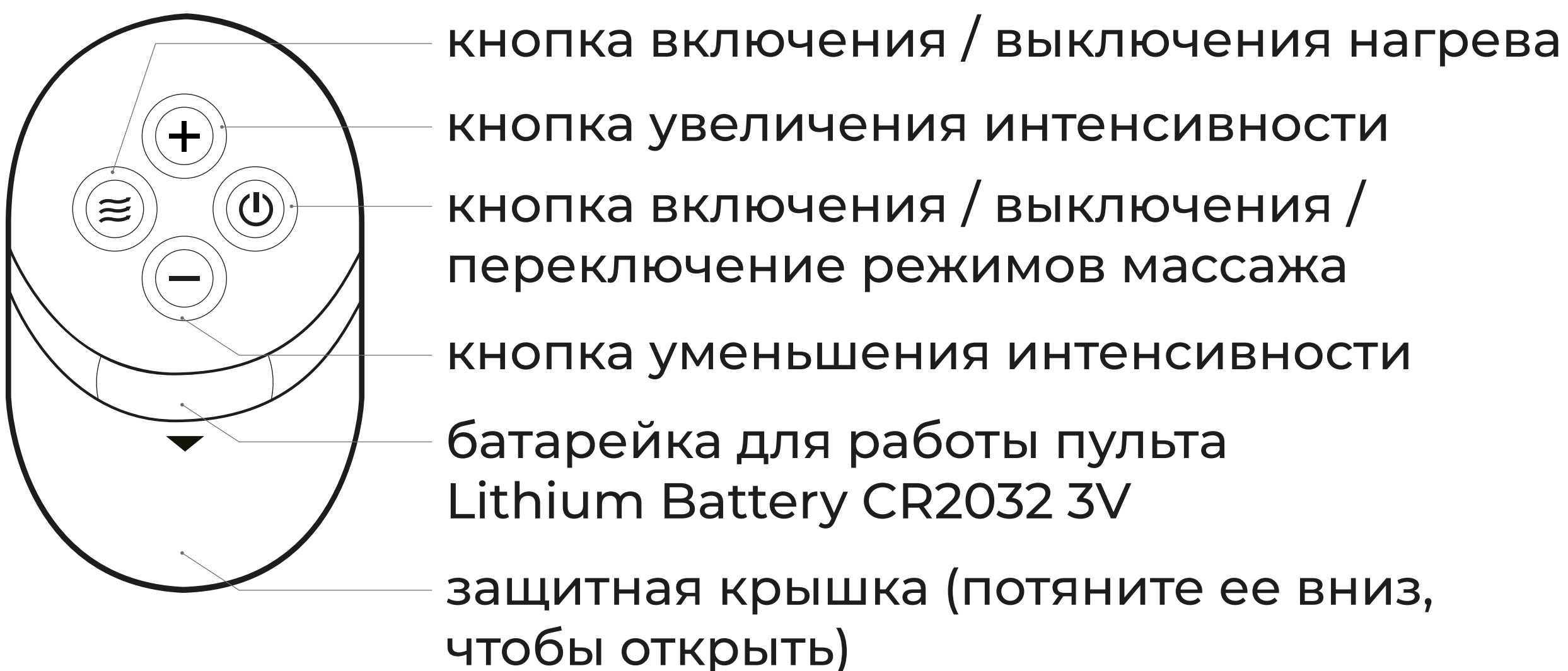

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА

- 1** Включите прибор коротким нажатием на кнопку включения / выключения, по умолчанию будет выбран последний используемый режим. Уровень интенсивности по умолчанию минимальный.
- 2** Выберите необходимый режим, нажав на кнопку включения / выключения, при каждом следующем нажатии будет включаться новый режим.
- 3** Нажатие кнопки нагрева отключает и включает нагрев однократным нажатием.
- 4** Выберите интенсивность массажа, с помощью кнопок «+» и «-», всего у массажера 16 уровней, рекомендуется начинать с 1-2 уровня.
- 5** Выключите массажер с помощью длительного нажатия кнопки включения.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Во время зарядки индикатор заряда горит синим светом. При полном заряде синий индикатор погаснет.

Когда потребуется подзарядка устройство будет отображать красный индикатор на пару секунд, сообщая, что аккумулятор следует зарядить.

⚠ Сообщая о необходимости заряда, прибор проработает еще 1-2 сеанса.

- При полностью разряженном аккумуляторе массажер выключится автоматически.
- Общее время заряда аккумулятора: ~ 2-2,5 часа.
- Время работы устройства: 80-60 минут.
- Используйте зарядное устройство с блоком питания 5V- 2A и USB-провод type-c, который входит в комплект.

РЕЖИМЫ МАССАЖА

Похлопывание

Ритмичные легкие удары имитируют традиционные техники похлопывания, способствуя расслаблению поверхностных слоев кожи и уменьшению болевых ощущений.

Разминание

Интенсивная работа глубоких слоев мышц путем круговых движений позволяет снять напряжение, улучшить кровообращение и эластичность тканей.

Постукивание

Легкое постукивание стимулирует циркуляцию крови, активизирует биологически активные точки и снимает усталость.

Иглоукалывание

Имитация традиционного китайского метода акупунктуры оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие, улучшает общее самочувствие.

Авто

Автоматический выбор программы, подходящий для большинства пользователей. Оптимально подобранные уровни интенсивности и чередование различных техник обеспечивают полноценный уход за мышцами шеи и спины.

Туйна

Данный режим заимствован из китайской традиционной медицины. Представляет собой сочетание нажатий, растирания и разминания, направленных на глубокий массаж мышц и связок. Такой подход эффективен для снятия мышечного напряжения, улучшения кровообращения и снижения боли в спине и шее.

Надавливание

Постоянное давление обеспечивает глубокое проникновение тока в мышцу, улучшая её тонус и упругость.

Расслабление

Специальный режим для быстрого снятия напряжения и устранения усталости. Действие направлено на плавное разминание мышц, постепенную релаксацию. Подходит для повседневного использования после тяжелого дня или активной тренировки, снимает / облегчает последствия стресса.

Импульс

Быстрое переключение между разными уровнями мощности создает эффект вибрационного массажа, способствующего глубокому воздействию на проблемные зоны.

Шиацу

Режим, созданный по японской технике точечного массажа. Оказывает мягкое давление на ключевые точки в области шеи и воротниковой зоны, снимая напряжение, успокаивая мышцы и улучшая подвижность шеи. Отлично подойдет для борьбы с головной болью, чувством тяжести и постоянной усталостью в верхней части спины и шее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1 Если вы чувствуете дискомфорт во время сеанса или на коже появилось раздражение, немедленно прекратите использование массажера.
- 2 Не используйте зарядные устройства с другими параметрами, это может привести к перегреву прибора или пожару.
- 3 Массажером запрещено пользоваться детям.
- 4 Не трогайте электроды руками во время сеанса массажа.
- 5 Не используйте массажер на участках кожи с травмами, ожогами, экземой и т.д.
- 6 Не пользуйтесь массажером больше указанного в рекомендациях времени (15-30 минут), это может привести к раздражению кожи.
- 7 При использовании фиксаторов убедитесь в том, что они не пережимают электроды и не мешают их контакту с кожей.

- 8** Не пользуйтесь массажером в помещениях с повышенной влажностью и избегайте попадания воды на корпус.
- 9** Не оставляйте массажер работающим без присмотра.
- 10** Во время заряда аккумулятора возможно небольшое нагревание прибора — это нормально.
- 11** При появлении запаха гари, дыма или неисправностей другого толка, немедленно прекратите использование и обратитесь в наш отдел технической поддержки.
Не пытайтесь починить массажер самостоятельно.
- 12** Избегайте контакта с электродами после функции нагрева, дайте им остыть.
- 13** Не используйте массажер вблизи открытого огня, плиты или других источников тепла.
- 14** Не пользуйтесь массажером во время сна.
- 15** Людям с чувствительной кожей рекомендуется использовать массажер с осторожностью, на маленькой интенсивности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ☐ Злокачественные опухоли
- ☐ Беременность
- ☐ Наличие кардиостимулятора
- ☐ Гипертония
- ☐ Кожные заболевания
- ☐ Нарушения сердечного ритма
- ☐ Склонность к кровотечениям
- ☐ Диабетическая невропатия и другие нарушения чувствительности кожи
- ☐ Прием медикаментов
- ☐ Непереносимость микротоков

⚠ Если у вас имеются хронические заболевания позвоночника, сердечно-сосудистой системы, неврологические расстройства или другие серьезные проблемы со здоровьем, перед началом использования проконсультируйтесь с врачом.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- ☐ Храните массажер в сухом недоступном для детей месте. Избегайте продолжительного попадания прямых солнечных лучей на корпус.
- ☐ Перед очисткой массажера убедитесь, что он выключен. Используйте мягкую ткань, смоченную водой. При сильных загрязнениях можно смочить ткань медицинским спиртом (концентрация не выше 75%). Отдельно протирайте каждый электрод.


○ Дайте массажеру высохнуть естественным путем после очистки, и только после этого убирайте его в место хранения.

ⓘ Для ухода за массажером не используйте средства с абразивами, химическими веществами или жидкости, содержащие коррозионные элементы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы корпуса:	ABS-пластик, силикон
Вес:	128 гр
Размер:	152 x 139 x 42 мм
Номинальное напряжение:	5 В
Номинальный ток:	0.3 А
Емкость аккумулятора:	400 мАч
Номинальная мощность:	1.5 Вт
Продолжительность работы:	15 минут

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ

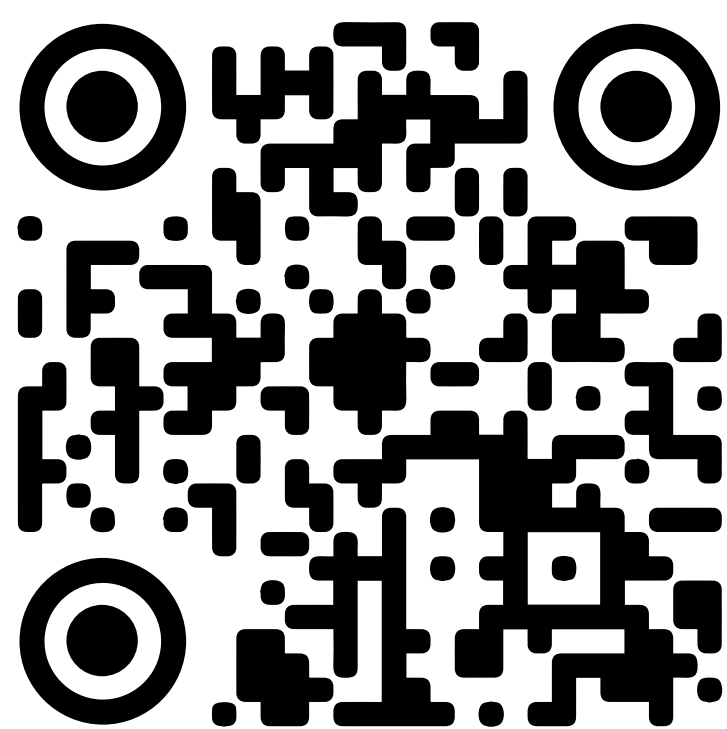

Зарегистрируйте товар на сайте WWW.HONEYCARE.RU и получите расширенную гарантию 3 года.

